

Thinking

NAUCO
inserto
SEAT

SEAT



2 A Teschio e denti, 1489.

RL 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e 'i vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.



UNA NUOVA SOLUZIONE
PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

UNA NUOVA SOLUZIONE PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione della seduta individuale Perfetta ricostruzione delle forme anatomiche



Perchè Nauco ?

- CONTENITIVO
- LEGGERO
- MULTIFUNZIONALE



KIT STRUTTURALE
MODULARE E MODIFICABILE



KIT DI IMBOTTITURA
Forme Libere



STABILITÀ E CONTROLLO
POSTURALE, ECCEZIONALE
CONTROLLO FEMORALE

INDICAZIONI CLINICHE / DESTINAZIONE D'USO

L'Unità posturale bacino Inserto Seat Nauco è consigliata preferibilmente, ma non esaustivamente per utenti non deambulanti, con insufficiente controllo posturale in particolare:

- che presentano asimmetrie, colpi di vento, obliquità pelviche, rotazioni pelviche, retroversioni e anteroversioni pelviche o che sono a rischio di lussazioni dell'anca;
- che necessitano di controllo laterale delle gambe e sostegno sacro/lombare per migliorare l'autocontrollo del tronco;
- per utenti anche piccolissimi che devono essere condotti ad una posizione seduta;
- per utenti che utilizzano ortesi per il rachide;
- per utenti che presentano una protrusione al livello sacrale/lombare.

PTS Pelvic Total Support

L'unità posturale deve essere utilizzata con una qualsiasi base di sostegno/carrozzina opportunamente fissata attraverso idonei sistemi aggiranti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ogni unità posturale Inserto Nauco contiene:

- Kit strutturale a densità differenziate composto da una base piatta di costruzione e da una serie di 22/24 inserti in polietilene a celle chiuse, personalizzabili e modificabili, utili a sostenere o correggere nel tempo la postura del bacino individualmente
- Kit di imbottitura a due strati lavabile a 60° con detergente neutro: lo strato interno al rivestimento è in memory foam, lo strato esterno è in schiuma poliuretana espansa flessibile
- Fodera di rivestimento con uno strato interno che la rende incontinenti, ignifuga, antibatterica; lavabile in acqua tiepida con detergente neutro. Si consiglia di utilizzare macchine per l'asciugatura. Il materiale non prevede l'impiego di sostanze disinfettanti.

RICAMBI

- Base piatta di costruzione
- Fodera di rivestimento
- Kit di imbottitura

AVVERTENZE


L'Unità posturale Inserto Seat Nauco, nella sua integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione (Kit strutturale, Kit imbottitura, Rivestimento) può essere semplicemente adattata alle misure / morfologia / deformità dell'utilizzatore. Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio riferibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di serie.

In alternativa

La messa in servizio dell' Unità Posturale Inserto Seat Nauco, priva o modificata anche parzialmente della integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione approntata e costruita secondo la prescrizione scritta da parte dell'operatore professionale in funzione dell'anatomia / morfologia / deformità dell'utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove dirette, è riferibile a quella di un dispositivo fabbricato su misura.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF
(con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainserito.com



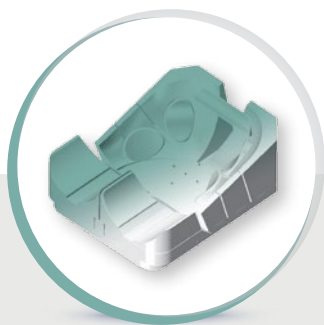

Inserto Nauco

22/24* INSERTI MODULARI MODIFICABILI

FODERA DI RIVESTIMENTO
CON UNO STRATO INTERNO
CHE LA RENDE INCONTINENTE


◦ Ogni kit posturale è da ordinare in base alla misura della carrozzina/dispositivo di trasporto.

TABELLA MISURE INSERTO NAUCO	PEDIATRICO				MISURE (cm) ADULTO
MODELLO	2225	2530	3034	3638	4042
Larghezza Effettiva (cm)	22	25	30	36	40
Larghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	24	27	32	38	42
Larghezza Min ottenibile con asportazione materiale (cm)	20	23	28	34	38
Lunghezza Effettiva (cm)	25	30	34	38	42
Lunghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	27,5	32,5	36,5	40,5	44,5
Lunghezza Min ottenibile	22	27	31	35	39
Range Min e Max altezza anteriore base piatta costruzione 14 (cm)**	4/5 ** altezze riferite ai modelli 2225 e 4042				
Range Min e Max altezza posteriore base piatta costruz+inserti contenitori post 9 (cm)**	11,5/18,5 ** altezze riferite ai modelli 2225 e 4042				

* possibili ulteriori riduzioni a mezzo asportazione materiale

◦ peso unità posturale min/max: 0,4 kg/1,3 kg
◦ portata massima riferita al modello 4042: 85 kg

N. REG. MINISTERO: 341251

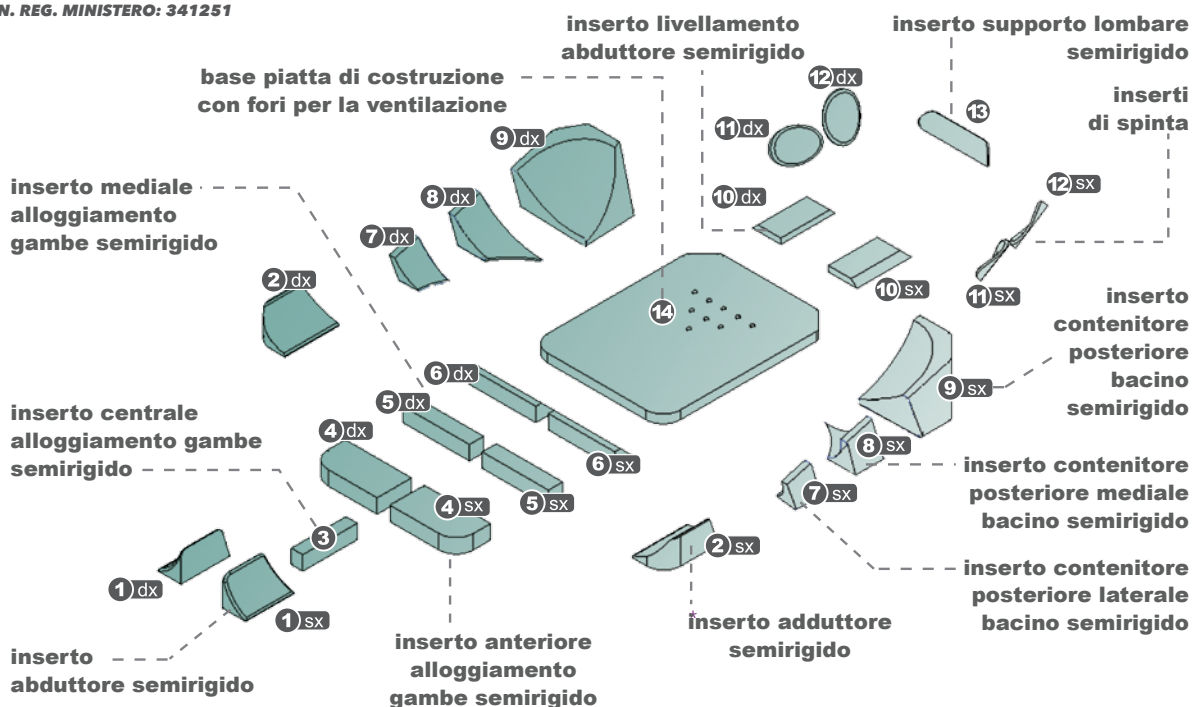


NAUCO

NAUCO
inserto[®]
S E A T

Personalizzazioni Nauco




PREVENZIONE LUSSAZIONE

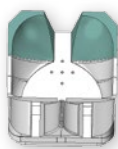

ACCOGLIENZA PROTRUSIONE




ADDUZIONE

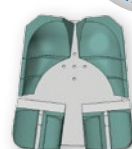


ABDUZIONE



ANCA A COLPO DI VENTO

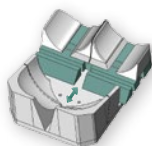

ANTISCIVOLAMENTO BACINO

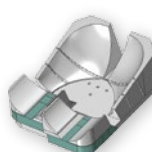


ASIMMETRIA ARTI INFERIORI



ASIMMETRIA IN ESITI
DI LUSSAZIONE



STIMOLAZIONE
DELL'ESTENSIONE DEL TRONCO

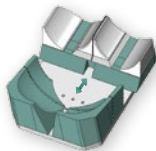


RETROVERSIONE BACINO
E ANTIVERSIONE




ROTAZIONE BACINO



AUMENTATA AVVOLGENZA
BACINO

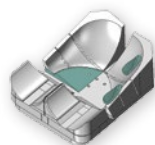

OBLIQUITÀ PELVICA

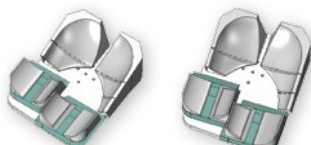

ASIMMETRIA DOVUTA A
ROTAZIONE DEL BACINO

PERSONALIZZABILE
INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione
della seduta individuale



LA SOLUZIONE INNOVATIVA

Una gamma sviluppata per rispondere alle esigenze posturali individuali dell'utente (come da prescrizione) in esiti di molteplici patologie per l'intero ciclo di vita di utilizzo.

Al fine del mantenimento delle sue caratteristiche è necessario controllare periodicamente lo stato di conservazione ed usura di tutte le parti che compongono il dispositivo ivi inclusi i sistemi aggrappanti.

L'unità posturale viste le dimensioni ed il peso risulta facilmente trasportabile.

www.versainserito.com

1 ADATTABILITÀ UOMO/DONNA

Finalmente la soluzione che fa la differenza, vestibilità personalizzata.

2 ADATTABILITÀ ALL'ANATOMIA E MORFOLOGIA INDIVIDUALE

Infinite possibilità per realizzare la soluzione posturale customizzata.

3 PTS PELVIC TOTAL SUPPORT

Perfetta aderenza all'anatomia del bacino e dei segmenti corporei ad esso correlati. Induce la risposta attiva del sistema muscolo scheletrico. La distribuzione dei carichi fornita dal PTS riduce lo stress meccanico nei tessuti profondi ed introduce benefici nella prevenzione delle ulcere da ipercarico pressorio.

4 IMBOTTITURA FORME LIBERE

L'innovativa imbottitura modulare per immergersi nel massimo comfort con protezione sicura.



NAUCO
inserto
SEAT

PRODOTTO DA:

Risposte reali a bisogni speciali
Pro Medicare


Pro Medicare srl

Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Fax. +(39) 0831 730739
Email: sales@promedicare.it
www.versainserto.com
www.promedicare.eu


AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485
N° 279412 / N° 279411



ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

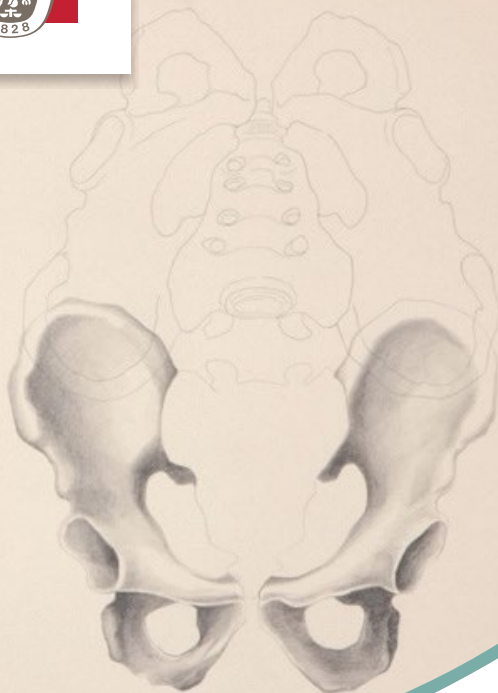

DISTRIBUITO DA:

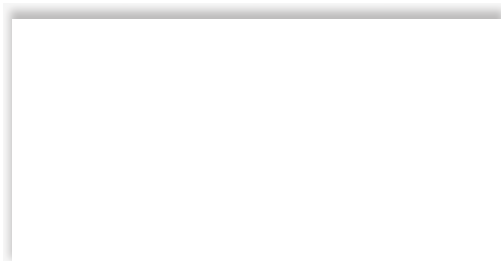

CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserto.com