

TThinking

VersaInserto[®]
SEATING SOLUTIONS

SEAT

SOLUZIONI POSTURALI PER IL BACINO PERSONALIZZABILI INDIVIDUALMENTE

P.T.S. (The Pelvic Total Support)

2 A Teschio e denti, 1489.

RL 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e 'r vacuo del-
l'osso sostenitore della guancia, e quello del
naso e della bocca sono d'eguale profondità e
terminano sotto il senso comune [sede centra-
le delle sensazioni] per linea perpendicolare. E
ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità
quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè
dal mento a capegli.



POSTURA PER PASSIONE DA OLTRE 20 ANNI

RISPOSTE REALI A BISOGNI SPECIALI

Impegnati da anni a sviluppare soluzioni posturali per rispondere alle esigenze più complesse in collaborazione con gli utenti, clinici, tecnici e care givers.




28th International Seating Symposium

Le nostre ricerche e i nostri lavori sono stati presentati nei più importanti congressi, sia in Italia che all'estero.

PTS (PELVIC TOTAL SUPPORT) UN INNOVATIVO APPROCCIO ALLA POSTURA


CONCETTO:

Supporto Totale del sistema di relazione Femori/Bacino/Rachide (coccigeo/sacrale/lombare) di Uomini, Donne e Bambini.

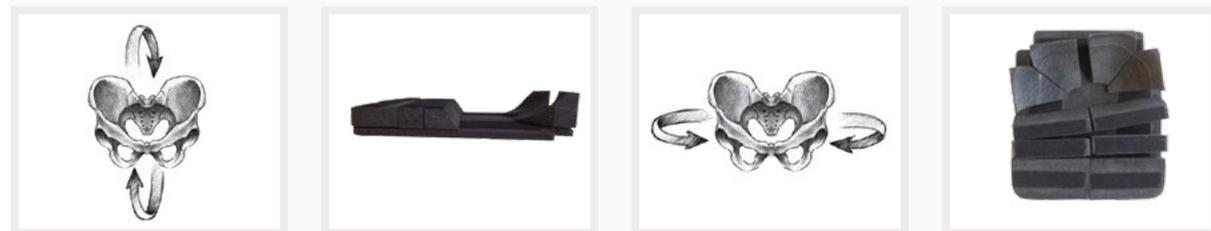

METODO:

Bilanciamento del sistema di relazione Femori/Bacino/Rachide (coccigeo, sacro, lombare) contenimento e stabilizzazione dell'anatomia, anche asimmetrica.

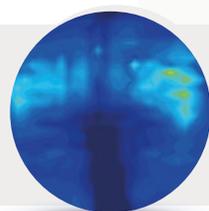

Risultati Test

La distribuzione delle pressioni oscilla in un intervallo compreso tra i 0,20 PSI e i 3,87 PSI (9,83 mmHg e 126,79 mmHg), i colori evidenziano la distribuzione dei picchi pressori sul cuscino. Dall'immagine si evince una completa aderenza ed elevata superficie di appoggio dell'anatomicità del bacino alla seduta (superficie in blu).

TECNOLOGIA

Struttura modulare composta da una base piatta di costruzione ed inserti pre sagomati indipendenti che assemblata si adatta a ogni forma, misura e morfologia di una persona seduta.



FACILE COME UN PUZZLE




Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainserito.com

POSTURA PER PASSIONE DA OLTRE 20 ANNI

UN MONDO DENTRO UN CUSCINO:

VESTIBILITÀ PERFETTA CHE ACCOGLIE:

- bacino uomo, donna e bambino
- deformità differenti e combinate
- molteplici morfologie per l'intero ciclo di vita di utilizzo

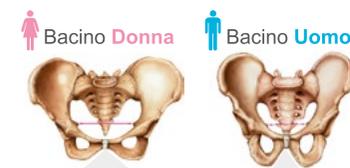


OGNI MODELLO INCLUDE NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD:



STRUTTURA E MATERIALI PER CONSENTIRE ALLINEAMENTO, CONTROLLO DELLA POSTURA, DISTRIBUZIONE DELLE PRESSIONI E COMFORT.

KIT STRUTTURALE per la costruzione della seduta individuale allestita e approntata sull'utente

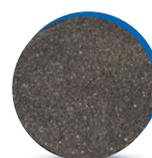

Polietilene combinato in differenti densità

Assorbe le vibrazioni e risponde con lento ritorno di memoria alle deformazioni. Estremamente leggero, permette modifiche con cutter.

KIT DI IMBOTTITURA *Forme Libere* per garantire perfetta aderenza al kit strutturale, al corpo e ai movimenti




MEMORY

Schiuma poliuretanică espansa flessibile ed elastica che supporta il movimento. Permette il ricircolo dell'aria.



Schiuma poliuretanică viscoelastica flessibile a celle aperte. Antivibrante ed ammortizzante.

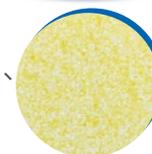

Schiuma poliuretanică antidecubito a ritorno lento di memoria. Aiuta la distribuzione delle pressioni e si adatta alla morfologia.

MATERIALI TESTATI PER OLTRE 15 ANNI

RIVESTIMENTO "NEW 3D"



- ELASTICO - INCONTINENTE - TRASPIRANTE - LAVABILE A 60°



Stabile, sicuro e durevole:

Superato il test strutturale in base al metodo richiesto dagli standard ISO 16840:2014

TEST

Ignifugo:

Superati i test d'inflammabilità EN 1021-1:2014 E EN 1021-2:2014



MODO inserto[®]
SPINE

BAMBINO
ADULTO
ANZIANO

- ✓ LESIONI DI ORIGINE TRAUMATICA E NON (ES. PARAPLEGIA, AMPUTAZIONI)
- ✓ PATOLOGIE GENETICHE (ES. SPINA BIFIDA)
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE (ES. SM)

BASICO inserto[®]
SEAT

BAMBINO
ADULTO
ANZIANO

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI, TC, ICTUS)
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE (ES. SM, PARKINSON, ALZHEIMER)

VIP inserto[®]
SEAT

BAMBINO
ADULTO
ANZIANO

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI, TC)
- ✓ SPINAL CORD INJURY
- ✓ SLA

PUCCO inserto[®]
SEAT

BAMBINO

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI)
- ✓ PATOLOGIE GENETICHE (ES. SMA)

TANTO inserto[®]
SEAT

BAMBINO
ADULTO

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI, TC)
- ✓ LESIONI DI ORIGINE TRAUMATICA E NON (ES. LESIONI SPINALI)
- ✓ PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI E GENETICHE (ES. DISTROFIA, SPINA BIFIDA, SMA)
- ✓ AMPUTAZIONI (ES. EMIPELVECTOMIA)

PRATICO inserto[®]
SEAT

BAMBINO
ADULTO
ANZIANO

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI)
- ✓ PATOLOGIE GENETICHE (ES. SPINA BIFIDA)
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE (ES. SM)
- ✓ LESIONI DI ORIGINE TRUMATICA E NON (ES. PARAPLEGIE)



NOVO inserto[®]
SPINE

BAMBINO
ADULTO
ANZIANO

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. ICTUS)
- ✓ LESIONI DI ORIGINE TRAUMATICA E NON (ES. TETRAPLEGIA, FRATTURE ARTICOLARI, FEMORE E BACINO)
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE (ES. SM, SLA)
- ✓ PATOLOGIE GENETICHE (ES. SPINA BIFIDA)
- ✓ AMPUTAZIONI (ES. EMIPELVECTOMIA, COSCIA, POA)

IMPULSO inserto[®]
SEAT

ADULTO
ANZIANO

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. ICTUS)
- ✓ LESIONI DI ORIGINE TRAUMATICA E NON (ES. LESIONI SPINALI INCOMPLETE, FRATTURE ARTICOLARI FEMORE, BACINO)
- ✓ AMPUTAZIONI

MEDIANO inserto[®]
SEAT

BAMBINO
ADULTO
ANZIANO

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI, TC)
- ✓ PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI (ES. DISTROFIE)
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE E GENETICHE (ES. MALATTIA MOTONEURONE, SMA, SINDROME DI RETT)

DOMINO inserto[®]
SEAT

BAMBINO
ADULTO
ANZIANO

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI, TC)
- ✓ MALATTIE DEGENERATIVE (ES. MALATTIE MOTONEURONE, PARKINSON)
- ✓ MALATTIE NEUROMUSCOLARI E GENETICHE (ES. DISTROFIE, LEUCODISTROFIA, SMA, SINDROME DI RETT)

NAUCO inserto[®]
SEAT

BAMBINO
ADULTO

- ✓ LESIONI ORIGINE TRAUMATICA E NON (ES. TETRAPLEGIA)
- ✓ PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI E GENETICHE (ES. DISTROFIA, SPINA BIFIDA, LEUCODISTROFIA)

MODELLO		BASICO	MODO	PRATICO	IMPULSO	MEDIANO	DOMINO	NAUCO	NOVO	TANTO	PUCCO	VIP
UTENTE	CAPACITÀ DI SPINTA AUTONOMA	SI / NO	SI	SI	SI / NO	NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
	RISCHIO IPERCARICO PRESSORIO	MEDIO / ALTO	MEDIO	LIEVE	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO / ALTO
DEFORMITÀ	CAPACITÀ ALLINEAMENTO	LIEVE	LIEVE/MODERATA	LIEVE	MODERATA/ALTA	ALTA	MODERATA/ALTA	MODERATA/ALTA	MODERATA/ALTA	MODERATA/ALTA	MODERATA/ALTA	MODERATA
	CAPACITÀ CONTENIMENTO	LIEVE	LIEVE/MODERATA	LIEVE	MODERATA	MODERATA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
CARATTERISTICHE	MANEGGEVOLEZZA TRASFERIMENTI LATERALI	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO	MENO IDONEO	NON IDONEO	NON IDONEO	IDONEO	IDONEO	NON IDONEO	NON IDONEO

Le indicazioni riportate hanno uno scopo informativo e non sostituiscono la completa analisi clinica, delle necessita' dell'utente nella scelta del sistema di postura e della prescrizione che rimane sempre e comunque a carico del prescrittore.

Richiedi maggiori informazioni sulle soluzioni e
le pubblicazioni delle ricerche svolte all'indirizzo
info@promedicare.it

inserto
SEAT

PRODOTTO DA:



Risposte reali a bisogni speciali
ProMedicare

Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Fax. +(39) 0831 730739
Email: sales@promedicare.it
www.versainserto.com
www.promedicare.eu


AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485



ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

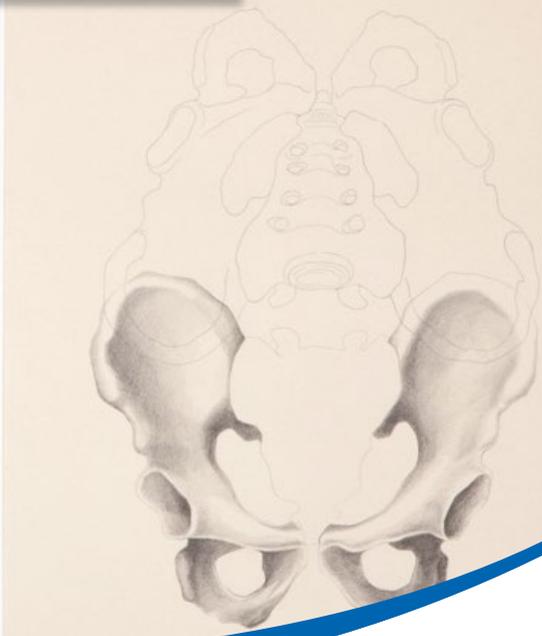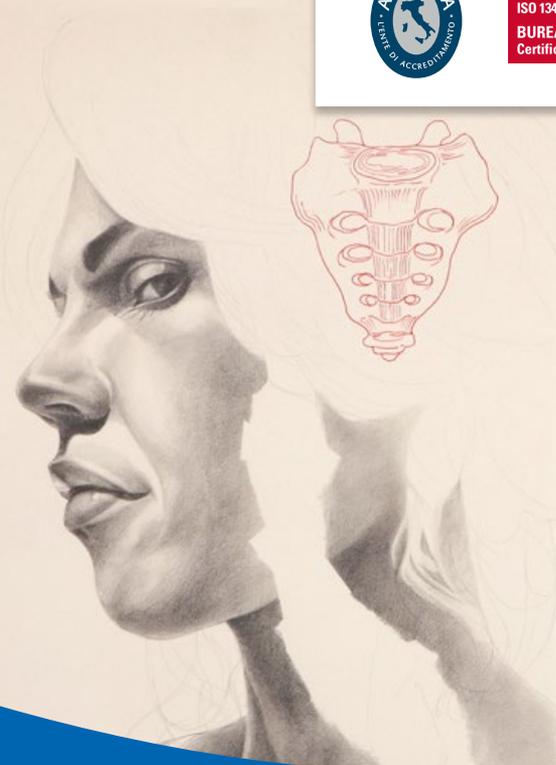

DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserto.com

Il produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzione senza preavviso.
I contenuti, la forma, la creazione, l'ingegno, l'immagine, la strutturazione di questo catalogo, sono di proprietà della Pro Medicare srl.
Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato. Ogni imitazione e/o copia esplicita e non, potranno essere perseguite
Opere di copertina dell'artista Giuseppe Ciraci - www.giuseppeciraci.com - ogni riproduzione è vietata.